



A.M.S. srl
ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE
Via A. Degasperi, 34/3 – 38123 Trento (TN) – Italy
tel. +39 0461 92 57 15 – fax +39 0461 92 35 00
Reg. Impr. TN, C.F. e P.IVA 02428260224
info@amstrento.it – www.amstrento.it

Assistenza Tecnica

Sistema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001

INOLTRO CHIAMATE DI INTERVENTO
assistenza@amstrento.it

Report di Controllo Qualità Sonde Ecografo

(Conforme a Manuale di Qualità per Apparecchio Ecografico)

Data Verifica: 2026-07-29

Codice Verifica: EM-260729-0003-EQ

Manuale di qualità per apparecchio ecografico

Anno creazione: 2026

Marca: TEST 2	Modello: TEST 2
Nr. inv.:	s/n: 7892354565
Struttura: TEST	Reparto: TESTTTTTTTTTTT

DATI APPARECCHIO					
Inventario:		Reparto:	TESTTTTTTTTTTTT	Costruttore:	TEST 2
S/N:	7892354565	Struttura:		Modello:	TEST 2
Note Ecografo:					

DATI SONDE COLLEGATE				
Sonda 1	Inventario:		Costruttore:	MINDRAY
	Tipo:	CONVEX	S/N / Modello:	664EF646 / C5-2
Sonda 2	Inventario:		Costruttore:	MINDRAY
	Tipo:	LINEARE	S/N / Modello:	MNFDJ565554 / L12-4

Tabella riassuntiva Controlli di Qualità:

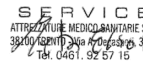
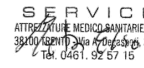
Sonda: C5-2s/n: 664EF646

Mod. usata per test: GEN-M

Preset impostato: ADOMINALE GENERALE

Gain: 50

Power: 100

Parametro	Baseline	Controllo 1	Controllo 3	Controllo 4
Data	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-29	2026-07-29
Ispezione visiva	BUONO	BUONO	BUONO	BUONO
Uniformità	BUONO	BUONO	BUONO	BUONO
Profondità max (cm)	16			
Misure verticali (scarto max mm)	0.4			
Misure orizzontali (scarto max mm)	0.0			
Zona Morta (mm)	1			
Risoluzione assiale 3 cm (mm)	6a (.25 mm)	1a (4 mm)	1a (4 mm)	1a (4 mm)
Risoluzione laterale 3 cm (mm)	6a (.25 mm)	1a (4 mm)	1a (4 mm)	1a (4 mm)
Risoluzione assiale 11 cm (mm)	1a (5 mm)	1a (5 mm)	1a (5 mm)	1a (5 mm)
Risoluzione laterale 11 cm (mm)	1a (5 mm)	1a (5 mm)	1a (5 mm)	1a (5 mm)
Massa anecoica area (mm²)	43.6			
Massa iperecogena area (mm²)	50.3			
Giudizio complessivo	BUONO	BUONO	BUONO	BUONO
Nome e firma del tecnico	ELSON META  SERVICE ATTREZZATURE MEDICO-SANITARIE SRL 38100 SPINTO (TN) - P.le Europa 3/1 Tel. 0461.92.57.15	ELSON META  SERVICE ATTREZZATURE MEDICO-SANITARIE SRL 38100 SPINTO (TN) - P.le Europa 3/1 Tel. 0461.92.57.15	ELSON META  SERVICE ATTREZZATURE MEDICO-SANITARIE SRL 38100 SPINTO (TN) - P.le Europa 3/1 Tel. 0461.92.57.15	ELSON META  SERVICE ATTREZZATURE MEDICO-SANITARIE SRL 38100 SPINTO (TN) - P.le Europa 3/1 Tel. 0461.92.57.15

Dettaglio Controlli di Qualità

Anno: 2026

Sonda: C5-2

s/n: 664EF646

1. ISPEZIONE VISIVA:

☒ **BUONO** (non vi sono crepe/tagli/altre non conformità né sulla sonda né sulla guaina)

☐ **SUFFICIENTE** (vi sono delle non conformità di lieve entità)

☐ **INSUFFICIENTE** (vi sono delle non conformità di entità non lieve)

2. UNIFORMITÀ:

☒ **BUONO** (immagine uniforme in tutte le zone lungo tutta la profondità di penetrazione)

☐ **SUFFICIENTE** (vi sono delle zone non uniformi che però non pregiudicano la visione dei pin)

☐ **INSUFFICIENTE** (vi sono delle zone non uniformi che pregiudicano la visione dei pin)

3. MASSIMA PROFONDITA' DI PENETRAZIONE:

E' determinata dalla frequenza del trasduttore, dal sistema di attenuazione utilizzato e dall'impostazione dei parametri di sistema.

DISTANZA DELL'ULTIMO BERSAGLIO VISIBILE (cm): ____

Valori di riferimento: frequenze minori di 2.5 MHz → > 16 cm frequenze fra 2,5 e 5 MHz → > 13 cm
frequenze fra 5 e 8 MHz → > 6 cm frequenze fra 8 e 12 MHz → > 4 cm

4. MISURE VERTICALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
20		
40		
60		
80		
100		
120		
140		
160		

Valori di riferimento: scarto < 1,5 mm fra due misure contigue

5. MISURE ORIZZONTALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)	Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
-20			40		
-40			20		
-60					
-80					

Valori di riferimento: scarto < 2 mm fra due misure contigue

☐ **TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA**

6. ZONA MORTA:

NUMERO TOTALE BERSAGLI: ____ ZONA MORTA (mm): ____

Valori di riferimento: < 7 mm per frequenze < 3 MHz
< 5 mm per frequenze comprese tra 3 e 7 MHz
< 3 mm per frequenze > 7 MHz

☐ **TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA**

7. RISOLUZIONE 3 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (4 mm)	2 ^a (3 mm)	3 ^a (2 mm)	4 ^a (1 mm)	5 ^a (.5 mm)	6 ^a (.25 mm)	N/A
Assiale	[X]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Laterale	[X]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

8. RISOLUZIONE 11 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (5 mm)	2 ^a (4 mm)	3 ^a (3 mm)	4 ^a (2 mm)	5 ^a (1 mm)	Non Applicabile
Assiale	[X]	[]	[]	[]	[]	[]
Laterale	[X]	[]	[]	[]	[]	[]

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

9. ANALISI DELLE MASSE ANECOICHE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm ²)

[] TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

10. ANALISI DELLE MASSE IPERECOGENE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm ²)

[] TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

CONCLUSIONI:

DATA: 2026-07-29

IL TECNICO: ELSON META

SERVICE
ATTREZZATURE MEDICO-SANITARIE S.R.L.
38100 TRENTO, Via A. Degasperi, 3/A
Tel. 0461.92.57.15

Tabella riassuntiva Controlli di Qualità:

Sonda: L12-4s/n: MNFDJ565554

Mod. usata per test: GENM

Preset impostato: TEST

Gain: 50

Power: 100

Parametro	Baseline	Controllo 1	Controllo 2	Controllo 3
Data	2026-07-29	2026-07-29		
Ispezione visiva	BUONO	BUONO		
Uniformità	BUONO	BUONO		
Profondità max (cm)	10			
Misure verticali (scarto max mm)	0.0			
Misure orizzontali (scarto max mm)	0.0			
Zona Morta (mm)	1			
Risoluzione assiale 3 cm (mm)	1a (4 mm)	1a (4 mm)		
Risoluzione laterale 3 cm (mm)	1a (4 mm)	1a (4 mm)		
Risoluzione assiale 11 cm (mm)	1a (5 mm)	1a (5 mm)		
Risoluzione laterale 11 cm (mm)	1a (5 mm)	1a (5 mm)		
Massa anecoica area (mm²)	19.6			
Massa iperecogena area (mm²)	28.3			
Giudizio complessivo	BUONO	BUONO		
Nome e firma del tecnico	ELSON META  SERVICE ATTREZZATURE MEDICO-SANITARIE SRL 38100 SPINTOLE A. P. (Trento) - Italy Tel. 0461. 92.57.15	ELSON META  SERVICE ATTREZZATURE MEDICO-SANITARIE SRL 38100 SPINTOLE A. P. (Trento) - Italy Tel. 0461. 92.57.15		

Dettaglio Controlli di Qualità

Anno: 2026

Sonda: L12-4

s/n: MNFDJ565554

1. ISPEZIONE VISIVA:

☒ **BUONO** (non vi sono crepe/tagli/altre non conformità né sulla sonda né sulla guaina)

☐ **SUFFICIENTE** (vi sono delle non conformità di lieve entità)

☐ **INSUFFICIENTE** (vi sono delle non conformità di entità non lieve)

2. UNIFORMITÀ:

☒ **BUONO** (immagine uniforme in tutte le zone lungo tutta la profondità di penetrazione)

☐ **SUFFICIENTE** (vi sono delle zone non uniformi che però non pregiudicano la visione dei pin)

☐ **INSUFFICIENTE** (vi sono delle zone non uniformi che pregiudicano la visione dei pin)

3. MASSIMA PROFONDITA' DI PENETRAZIONE:

E' determinata dalla frequenza del trasduttore, dal sistema di attenuazione utilizzato e dall'impostazione dei parametri di sistema.

DISTANZA DELL'ULTIMO BERSAGLIO VISIBILE (cm): ____

Valori di riferimento: frequenze minori di 2.5 MHz → > 16 cm frequenze fra 2,5 e 5 MHz → > 13 cm

frequenze fra 5 e 8 MHz → > 6 cm frequenze fra 8 e 12 MHz → > 4 cm

4. MISURE VERTICALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
20		
40		
60		
80		
100		
120		
140		
160		

Valori di riferimento: scarto < 1,5 mm fra due misure contigue

5. MISURE ORIZZONTALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)	Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
-20			40		
-40			20		
-60					
-80					

Valori di riferimento: scarto < 2 mm fra due misure contigue

☐ **TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA**

6. ZONA MORTA:

NUMERO TOTALE BERSAGLI: ____ ZONA MORTA (mm): ____

Valori di riferimento: < 7 mm per frequenze < 3 MHz

< 5 mm per frequenze comprese tra 3 e 7 MHz

< 3 mm per frequenze > 7 MHz

☐ **TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA**

7. RISOLUZIONE 3 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (4 mm)	2 ^a (3 mm)	3 ^a (2 mm)	4 ^a (1 mm)	5 ^a (.5 mm)	6 ^a (.25 mm)	N/A
Assiale	[X]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Laterale	[X]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

8. RISOLUZIONE 11 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (5 mm)	2 ^a (4 mm)	3 ^a (3 mm)	4 ^a (2 mm)	5 ^a (1 mm)	Non Applicabile
Assiale	[X]	[]	[]	[]	[]	[]
Laterale	[X]	[]	[]	[]	[]	[]

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

9. ANALISI DELLE MASSE ANECOICHE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm ²)

[] TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

10. ANALISI DELLE MASSE IPERECOGENE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm ²)

[] TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

CONCLUSIONI:

DATA: 2026-07-29

IL TECNICO: ELSON META

SERVICE
ATTREZZATURE MEDICO-SANITARIE S.R.L.
38100 TRENTO, Via A. Degasperi, 3/A
Tel. 0461.92.57.15